




**Infrarot-Thermometer 31.1133.01  
für die Temperaturmessung an  
der Stirn**

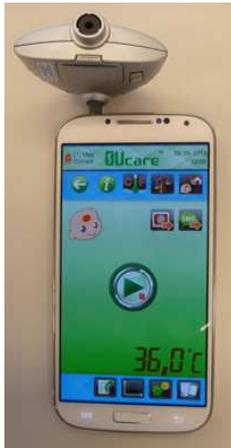

D

### Kurzbedienungsanleitung

1. Laden Sie die App OUcare (IRT OUcare) aus dem Apple App Store für Ihr iPhone oder aus dem Google Play Store für Ihr Android Smartphone bzw. öffnen Sie die bereits heruntergeladene App.



Starten Sie die App IRT OUcare.



Schaltfläche  
ist noch blass

2. Bringen Sie den O/S-Schalter in die richtige Position des Betriebssystems Ihres Smartphones (Schalterstellung 1 für Android, 2 für iPhone iOS).



3. Stecken Sie das Gerät in die Ohrhörerbuchse des Smartphones und entfernen Sie die Schutzkappe.




Schaltfläche wird kontrastreich

Drehen Sie es in einen für Ihre Messung geeigneten Winkel.



4. Richten Sie den Sensor auf die Stirn. Achten Sie auf einen Abstand des Sensors von 1 bis 3 cm! Die Messzeit beträgt ca. 1 Sekunde. Während der Messung darf der Abstand des Sensors zur Haut nicht verändert werden.

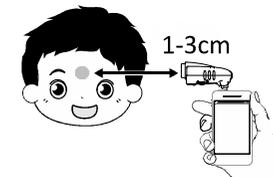

5. Links oben erscheint der letzte Benutzer (1-9). Starten Sie die Messung über die runde Schaltfläche auf dem Display.




Die gemessene Temperatur wird bei aktivierter Sprachausgabe angesagt. Das Gerät ist jetzt für eine erneute Messung bereit. (Anzeige L/H: Temperatur liegt außerhalb des Messbereichs)

## Die Temperaturmessung eines Objektes

Durch Berühren der Schaltfläche



wechseln Sie in den Modus zur Temperaturmessung eines Objektes.

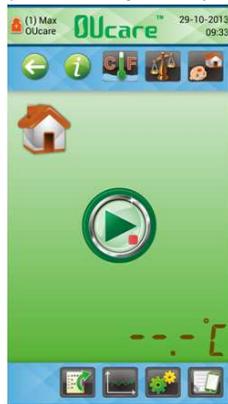

Der Messablauf ist der gleiche wie bei der Messung an der Stirn. Es erfolgt keine Sprachausgabe.

## Weitere Funktionen der App IRT Oucare

### Umschalten von °C in °F

- Berühren Sie die Schaltfläche



und die Messwerte werden in der eingestellten Maßeinheit angezeigt.

### Offset-Kompensation

- Berühren Sie die Schaltfläche,



um eine Einstellung vorzunehmen, zukünftige Messwerte immer um einen definierten Wert zu ändern. Diese Funktion ist nur für die Körpertemperaturmessung vorgesehen, um z.B. die individuelle Normaltemperatur auf 37°C einzustellen.

### Benutzerdefinierte Einstellungen vornehmen

- Berühren Sie die Schaltfläche



und Sie gelangen zur Spracheinstellung.



Bestimmte Sprachen gibt es möglicherweise nur in der Bezahl-Version.

Sprachausgabe an/aus



- Berühren Sie die Schaltfläche



und Sie gelangen zur Programmierung der Benutzer (max. 9 Benutzer). Wählen Sie einen Benutzer aus.

- Berühren Sie die Schaltfläche



und Sie gelangen zur Programmierung der Email-Adressen (max. 5) zum Versenden Ihrer Messwerte (1. Zeile: Namen eingeben, 2. Zeile: Email-Adresse).

- Berühren Sie die Schaltfläche



und Sie gelangen zur Programmierung der SMS-Adressen (max. 5) zum Versenden Ihrer Messwerte (1. Zeile:

Namen eingeben, 2. Zeile: Mobilnummer).

- Berühren Sie die Schaltfläche



und es wird die aktuelle Einstellung angezeigt. Messobjekt, Temperatureinheit und Offset-Kompensation (bei Körpertemperatur) können geändert werden.

### Grafische Darstellung der Messwerte

- Berühren Sie die Schaltfläche



und Sie gelangen zur Darstellung der Messwerte in einem Diagramm. T= Einzelwerte, D= Tagesdurchschnitt Wechsel der Darstellung Objekt-/Körpertemperatur möglich.

### Die Liste aufgenommener Messwerte

- Berühren Sie die Schaltfläche



und Sie gelangen zur Liste der Messwerte in zeitlicher Reihenfolge.


Wechsel der Darstellung Objekt-/Körpertemperatur, Aufruf, Verschieben und Löschen von Einzelwerten möglich.

Berühren Sie diese Schaltfläche,



um einen Wert manuell hinzuzufügen

### Die LED-Anzeige

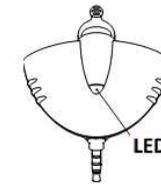

LED-Anzeige

rot: fehlender Kontakt oder Batterie erschöpft  
grün: fehlerfreie Funktion

### ACHTUNG

Trennen Sie das Infrarot-Thermometer nach Messende vom Smartphone. Nur dann schaltet es sich automatisch aus. Anderenfalls verbraucht es unnötig Strom.